

Ръководство на потребителя

Beurer cellulite releaZer – устройство за борба с целулита

I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. устройство за борба с целулита – Beurer cellulite releaZer
- 1 бр. микро USB кабел за зареждане
- 1 бр. хранващ адаптер
- 1 бр. инструкции за употреба

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО И НЕГОВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

- Целулитът представлява дребни дупчици, които се появяват най-често върху кожата на бедрата, горната част на ръце и седалището. Той се появява най-често при жените заради женския хормон естроген.
- Освен това при жените колагеновите влакна в съединителната тъкан са разположени паралелно. Женската кожа е по-мека и не упражнява достатъчно силен натиск върху натрупаните мастни клетки под кожата и те „излизат“ на повърхността под формата на целулит.
- Целулитът не е медицински проблем, обикновено не води до физически неразположения, а е изцяло козметичен проблем.
- Beurer cellulite releaZer увеличава микроциркулацията в тъканите ви чрез вибрация.

III. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред е предназначен за лична употреба. Той не е създаден за търговски или медицински цели.
- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Преди първоначална употреба проверете уреда, кабела и всичките му компоненти добре за следи от повреда – ако имате съмнение за целостта на опаковката или безупречното състояние на уреда, моля обърнете се към търговеца на продукта.

- Устройството може да се използва от деца над 8 годишна възраст, хора с нарушени физически или сензорни функции, както и от хора със специални образователни нужди само под надзор от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- Дръжте опаковката на уреда и самия уред далеч от деца.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца!
- В никакъв случай не отваряйте уреда и аксесоарите му и не се опитвайте да ги поправяте сами. Всички поправки трябва да се извършват от оторизиран техник. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Ако хранващият кабел на този уред е повреден трябва да бъде изхвърлен. Ако това е невъзможно – целият уред трябва да се изхвърли.
- Този уред не е медицинско устройство. Той е предназначен за масаж.
- Използвайте този уред само с оригиналните му аксесоари.
- Използвайте този уред само по предназначението му – масажирание на човешкото тяло. Всяка неправилна употреба на този уред може да бъде опасна.
- Този уред не е заместител на лекарска помощ. Използвайте го само по описания в тези инструкции начин.
- **Не използвайте уреда:**
 - ако страдате от нараняване или друг медицински проблем зоната, която искате да масажирате (например отворени рани);
 - ако сте бременна;
 - докато спите, когато сте в автомобил или върху животни;
 - ако вършите дейност при която неочаквана реакция може да бъде опасна;
 - върху главата, гениталиите и лицето си.
 - След като сте приели субстанции, които намаляват реакциите ви (алкохол, болкоуспокояващи);
 - за повече от 15 минути, за да избегнете прегряване на уреда. Оставете уреда да изстине за минимум 15 минути преди следваща употреба;
 - веднага след или точно преди слънчеви бани – употребата на този уред повишава риска ви от слънчево изгаряне;
- **Преди употреба се консултирайте с вашия лекар:**
 - ако страдате от сериозен медицински проблем или се възстановявате от операция;


- ако страдате от обикновена настинка, придружена от треска, разширени вени, тромбоза, флебит, жълтеница, диабет, заболявания на нервната система (например ишиас) или остри възпаления;
- ако имате пейсмейкър или други медицински импланти;
- ако страдате от болки с неустановен произход;
- Консултирайте се с лекар, ако не сте сигурни, че този уред е подходящ за вас.

Относно батериите:

- Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане и задушаване.
- Съхранявайте батериите далеч от обсега на деца.
- Спазвайте правилния поларитет на батериите.
- Пазете батериите от силна топлина и огън – опасност от експлозия!
- Не разглобявайте, мачкайте или срязвайте батериите.
- Преди употреба заредете батериите според тези инструкции.
- Заредете батериите напълно преди първата употреба на този уред.
- За максимално добра работа на батериите ги зареждайте напълно поне два пъти годишно.

IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Микро USB връзка
2. Дръжки
3. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ
4. Светлинен индикатор за работа
5. 4 различни повърхности за извършване на процедури (гладка повърхност, повърхност с възли, повърхност с остри краища и повърхност със затъпени краища).

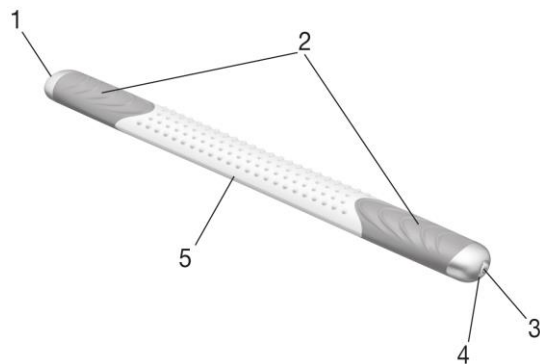

Светлинен индикатор:


Светлинният индикатор мига в кръг: уредът се зарежда.

Светлинният индикатор свети непрекъснато: зареждането е завършено.

Левият и десният светлинен индикатор светят един след друг: Батерията е изтощена.

V. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

- Преди първоначална употреба заредете уреда за минимум 3.5 часа.
- Сложете захранващия кабел в захранващия адаптер, след това поставете захранващия кабел в уреда, а след това сложете щепсела в ел. контакт на стената. Може да заредите уреда и чрез USB порт на компютър, чрез USB кабела.

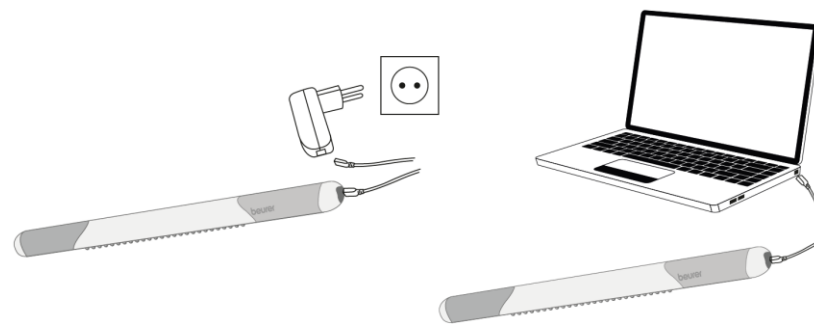

VI. УПОТРЕБА

- Преди употреба нежно втрийте масажно олио върху кожата си в зоните, които ще масажирате. Важно е да не използвате продукти, които имат силно загряващо или охлаждащо действие, тъй като това може да раздразни кожата ви по време на масажа.
- След като се втрили масажното олио в кожата си, моля избършете ръцете си добре, за да избегнете изпускане на устройството и повреди върху силиконовата повърхност на дръжките на уреда.

Включване на уреда и избор на вибрации:

- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ, за да включите уреда. Светлинният индикатор светва в синьо и първата вибрационна настройка се включва. Този уред има 4 вибрационни настройки.
- 1-во натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = уредът се включва, светлинният индикатор светва в синьо, а нивото на вибрация е ниско.
- 2-ро натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = вторият светлинен индикатор светва в синьо, а нивото на вибрация е средно.
- 3-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = третият светлинен индикатор светва в синьо, а нивото на вибрация е силно.

- 4-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = четвъртият светлинен индикатор премигва в синьо, а вибрацията е пулсираща.
- 5-то натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ = уредът се изключва и индикаторът загасва.

Съвети за употреба:

- Когато използвате уреда го дръжте с двете си за ръце за дръжките.
- За оптимални резултати използвайте този уред на всеки 2 дни.
- Възможно е да се появят сериозни зачервявания или синини в зоната, която сте третирали. Това е нормално и показва, че сте използвали уреда правилно.

Примерни приложения

Може да използвате този уред в зоните на тялото си, където имате целулит. Следните два примера са за масажиране на: външната част на бедрата и задната част на бедрата.


Външна част на бедрата:

Процедурата върху външната част на бедрата обикновено трае 7 минути и се състои от общо 3 фази. За да започнете процедурата, моля:

1. Следвайте инструкциите за втриване на масажно олио преди самата процедура.
2. Поставете крака, който ще масажирате върху ръба на вана, върху стол и т.н. През цялото време на масажа трябва да сте в изправено положение.
3. Изберете желаното от вас вибрационно ниво (1, 2, 3 или 4) чрез бутона за ВКЛ/ИЗКЛ. Уредът започва да вибрира.
4. **Фаза 1:** Движете уреда с бързи, кръгови движения без да натискате уреда прекалено много за около 3 минути. За целта използвайте повърхността с възли.
5. **Фаза 2:** Движете уреда с бавни, дълбоки кръгови движения като натискате уреда повече за около 3 минути. За целта използвайте повърхността с възли.
6. **Фаза 3:** Тази фаза има за цел да махне натрупаната вода от тялото ви. Движете уреда към сърцето си с умерен натиск. Когато правите това, започнете движението в горната външна част на бедрото и бавно преместете началната точка надолу към коляното. Един ход трябва да



бъде с приблизителна дължина 10 см. Извършете този процес 5 пъти, движейки се по външната страна на бедрото, докато стигнете до областта на коляното. В края преместете устройството върху цялата външна част на бедрото веднъж.

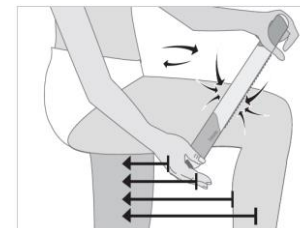

Задна част на бедрата:

Процедурата върху задната част на бедрата обикновено трае 7 минути и се състои от общо 3 фази. За да започнете процедурата, моля:

1. Следвайте инструкциите за втриване на масажно олио преди самата процедура.
2. Поставете крака, който ще масажирате върху ръба на вана, върху стол и т.н. През цялото време на масажа трябва да сте в изправено положение.
3. Изберете желаното от вас вибрационно ниво (1, 2, 3 или 4) чрез бутона за ВКЛ/ИЗКЛ. Уредът започва да вибрира.
4. **Фаза 1:** Движете уреда с бързи, кръгови движения без да натискате уреда прекалено много за около 3 минути. За целта използвайте повърхността с възли.
5. **Фаза 2:** Движете уреда с бавни, дълбоки кръгови движения като натискате уреда повече за около 3 минути. За целта използвайте повърхността с възли.
6. **Фаза 3:** Тази фаза има за цел да махне натрупаната вода от тялото ви. Движете уреда към сърцето си с умерен натиск. Когато правите това, започнете движението в горната външна част на бедрото (седалището) и бавно преместете началната точка надолу към коляното. Първият ход трябва да бъде с приблизителна дължина 10 см. Извършете този процес 5 пъти, движейки се по външната страна на бедрото, докато стигнете до областта на коляното. Всеки ход трябва да бъде по-дълъг с няколко сантиметъра от предишния ход. В края преместете устройството върху цялата външна задна част на бедрото веднъж.



VII. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Експлоатационният живот на този уред зависи от начина по който го използвайте. За да сте сигурни, че той работи правилно за по-дълъг период от време трябва да го използвате внимателно.
- Почистете уреда със суха кърпа след всяка употреба, без да използвате абразивни почистващи препарати.
- Пазете уреда от прах, вода, топлина, пряка слънчева светлина, химикали, резки температурни промени и електромагнитни полета. Не изпускайте уреда.

VIII. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батериите, съдържащи вредни

вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак



Не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



Използвайте уреда само в помещения на закрито.



Този продукт отговаря на всички приложими европейски и национални директиви.



Уредът се изнася в Руската Федерация и в Общността на Независимите Държави.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец илиоторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.