

Ръководство на потребителя за отоплителна подложка Beurer HK 55












1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. отоплителна подложка Beurer HK 55
- 1 бр. каишка за удължаване
- 1бр. контролер за управление на уреда
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години) освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.
- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.

- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета контролер.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Не слагайте игли и други остри предмети в уреда и не го използвайте във влажни помещения.
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Когато подложката е включена не бива:
 - Да поставяте предмети върху нея;
 - Да поставяте други източници на топлина върху нея (например бутилки с топла вода, други отоплителни подложки и тн.)
- Електронните компоненти в контролера се загряват, когато уреда се използва. Поради тази причина контролерът никога не трябва да бъде покриван с нищо или поставян върху нагревателната подложка, когато се използва.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.


	Не бодете и прободайте уреда.		Не избелвайте.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Текстилът, използван за това устройство, отговаря на изискванията на Oeko-Tex Standard 100.		Не гладете.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Този уред е предназначен за затопляне на хора. Не бива да го използвате върху животни или предмети.
- Подложката може да се използва върху: корем, гръб, стави или врат. Може да навиете подложката, ако искате да я използвате на врата си.
- Удължаващите се закопчалки правят подложката много удобна за употреба, тъй като се прикрепя към тялото ви лесно.

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Щепсел
2. Кабел
3. Контролер за управление на уреда
4. Осветен дисплей за настройки на температурата
5. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ и за настройка на температура
6. Връзка за захранване

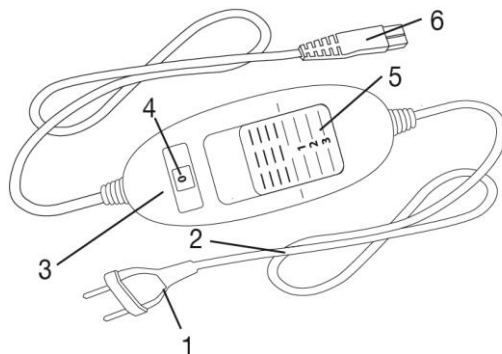

5. ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО: Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Ако автоматичната защита се е включила, температурните настройки вече не светят, когато включите уреда. Имайте предвид, че от съображения за безопасност уредът вече не може да работи след включване на автоматичната защита и трябва да потърсите оторизиран техник.

- Махнете опаковката на уреда и проверете дали няма следи за повреда върху него или кабела.
- Внимавайте подложката да не се нагъне или прегъне по време на употреба.
- Първо свържете контролера към подложката чрез връзката за захранване (6).
- След това сложете щепсела в електрически

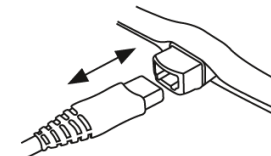

6. УПОТРЕБА

- За да включите уреда плъзнете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ и за настройка на температура към позиция 1, 2 или 3. Температурните настройки (4) се осветяват.
- Температурните нива са 4: Ниво 0= ИЗКЛ; Ниво 1= минимална температура; Ниво 2= средна температура; Ниво 3=максимална температура.
- За да загрее подложката най-бързо, включете температурата на Ниво 3. През първите 10 минути подложката ще загрее най-много.
- **ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.
- Подложката има функция за автоматично изключване. Тя се изключва след припл. 90 минути на работа. След това дисплеят за настройка на температурата започва да мига. За да включите подложката отново след това, бутон ВКЛ/ИЗКЛ (5) трябва да бъде на позиция „0“. След около 5 секунди може да включите уреда отново.
- За да изключите уреда плъзнете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (5) до позиция „0“. Температурните настройки ще спрат да светят.
- Ако не използвате уреда винаги го изключвайте от бутон (5), вадете захранващия кабел от него и изваждайте щепсела на кабела от контакта.

7. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване, вадете захранващия кабел от уреда и от контакта.
- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа. Не използвайте химични или абразивни почистващи препарати.
- Може да перете подложката в пералня на програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30 °C) с прах за пране за деликатни тъкани.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на подложката. Затова тя не бива да се пере повече от 10 пъти през целия си период на употреба.
- **ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо или гладете подложката.
- Веднага след изпиране изпънете подложката, така че да приеме оригиналните си форми и я оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не я простирайте с щипки или други помощни средства, които може да я прегънат.
- Не използвайте подложката преди да е напълно изсъхнала. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Никога не включвайте подложката, за да изсъхне по-бързо – риск от токов удар!
- Преди да приберете подложката я оставете да изстине напълно.
- Извадете захранващия кабел от нея преди да я приберете.
- Не поставяйте тежки предмети върху подложката. Препоръчваме да я съхранявате в оригиналната ѝ опаковка.

8. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

9. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.