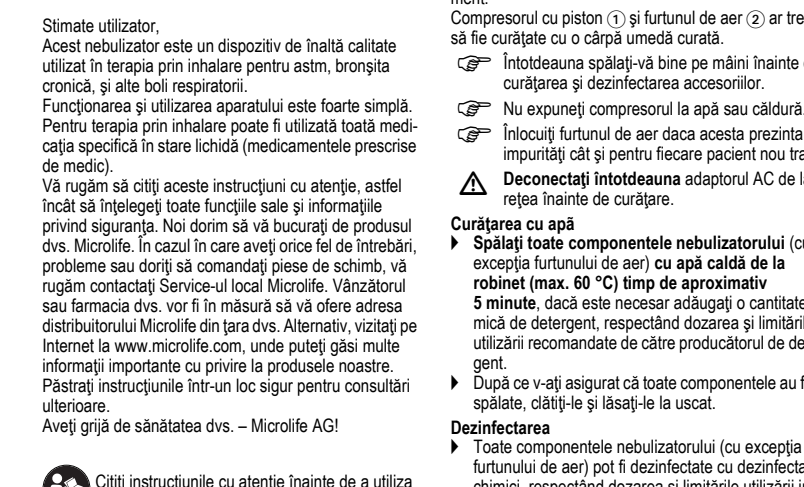
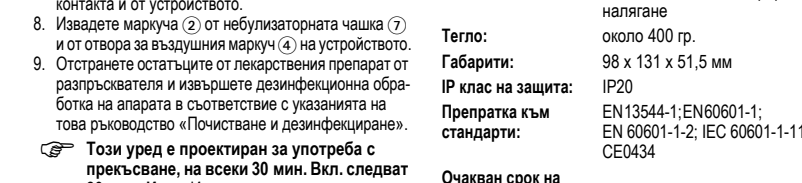
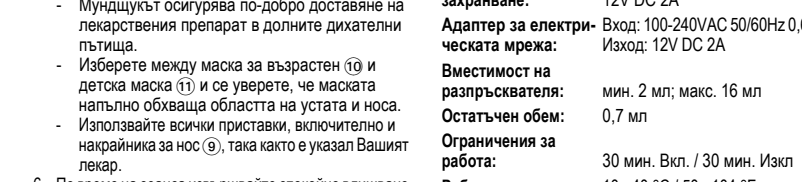
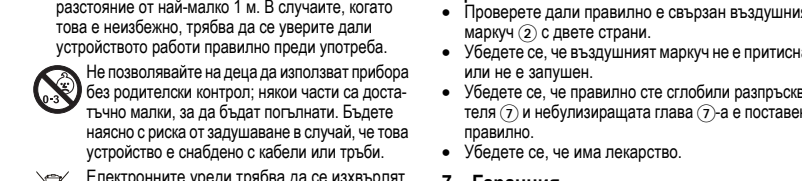
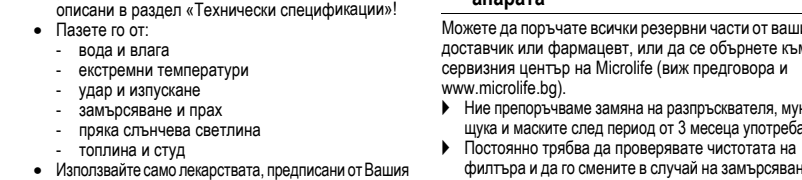
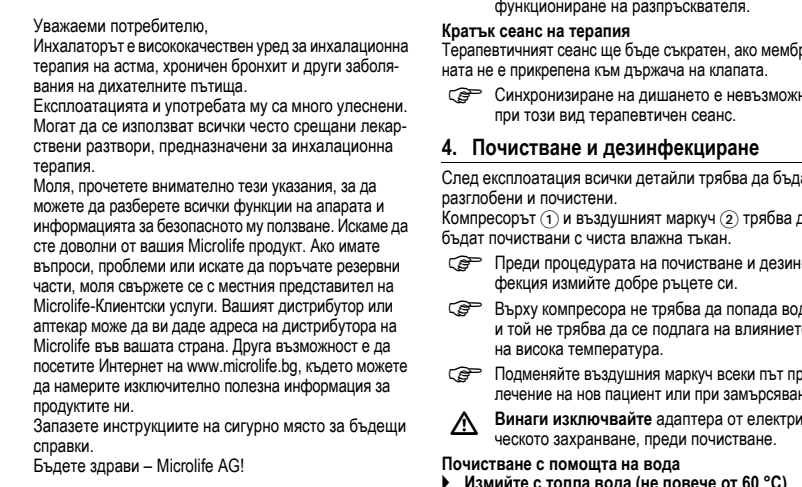
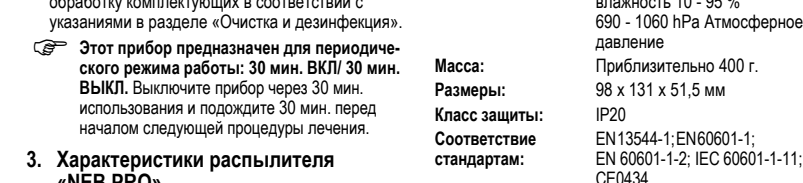
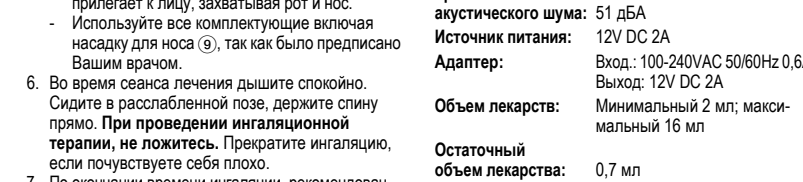
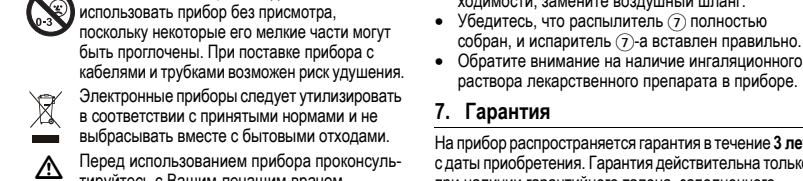
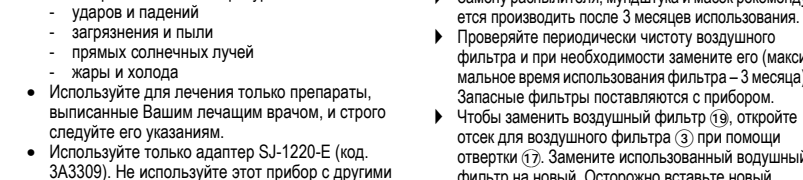
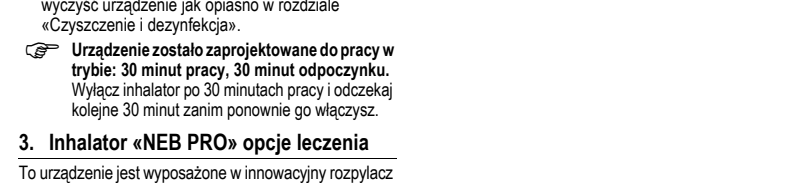
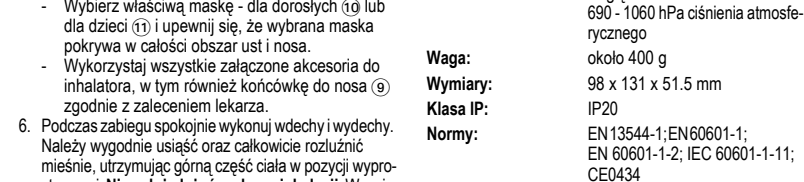
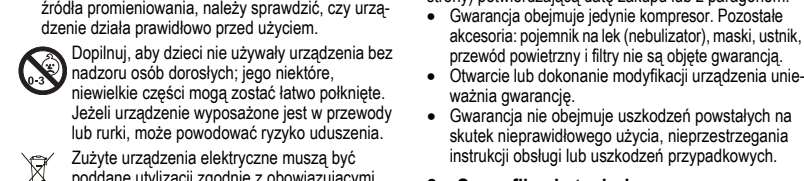
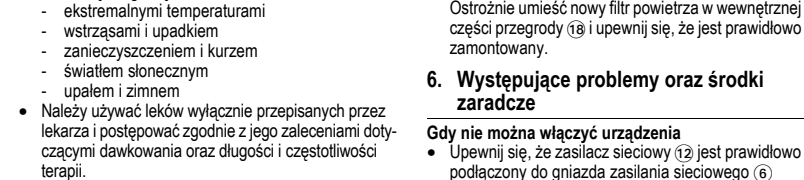
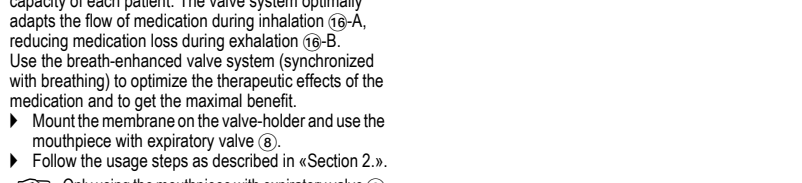
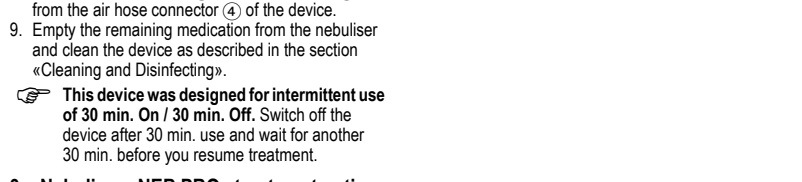
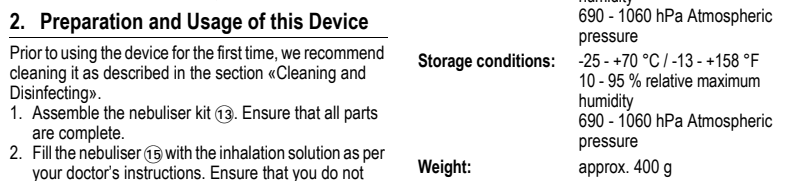
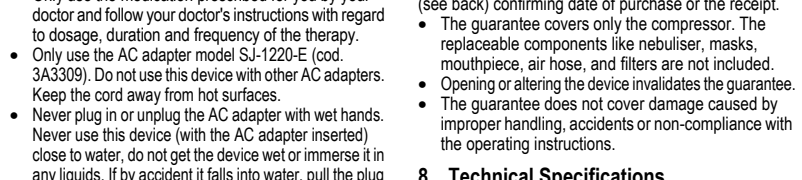
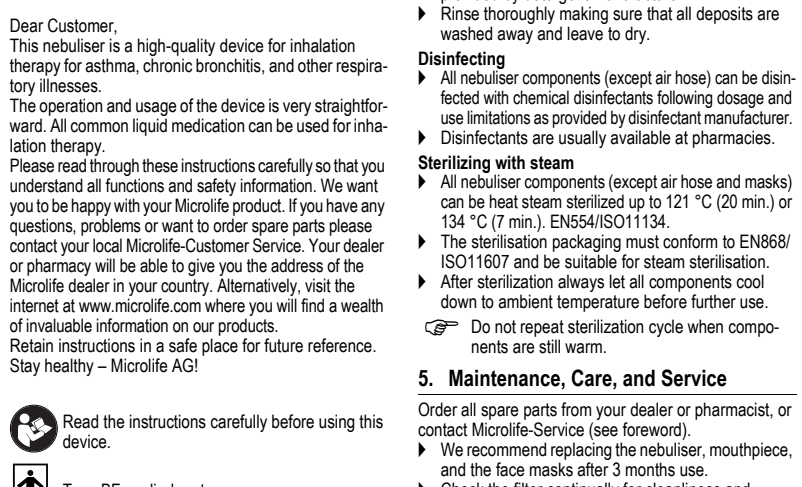
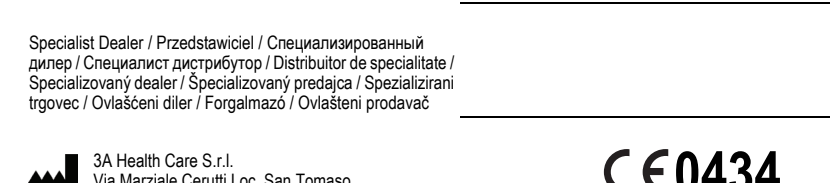
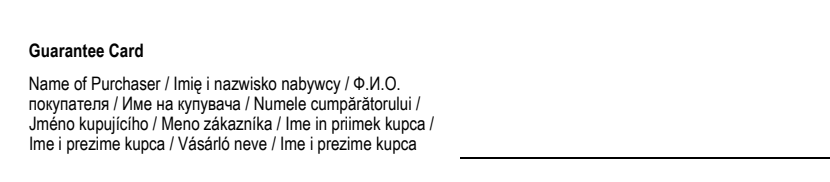
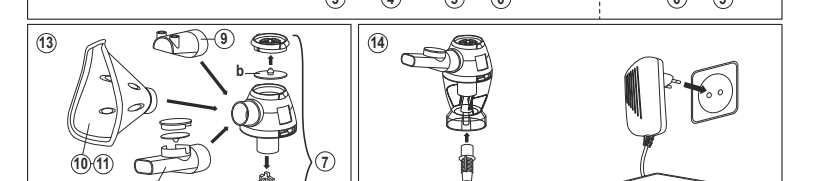


Prenosný kompresorový inhalátor

- Plstový kompresor
- Vzduchová hadica
- Prepínač pre vzduchový filter
- Konektor vzduchových hadice
- Plnepnáč ON/OFF
- Konektor pro sifový adaptér
- Rozprašovač „nEB PRO“
 - Rozprašovací hadica
 - Membrána
 - Náústek s ventilom
 - Nosový nastavok
 - Maska na nos po dospieť
 - 1) Maska na hľad po deti
 - Sifový adaptér
 - 1) Sestavení jednotlivých častí inhalátoru
 - 1) Sestavení zarízení
 - Naplnění aparátu
 - 1) Inhalace synchronizovaná s dýcháním
 - 1) Otevření prostoru pro vzduchový filtr
 - 1) Výměna vzduchového filtra
 - 1) Vzduchový filtr

Vážení zákazníci, Váš nový inhalátor je v vysoké kvalitei prístroj po inhalácii lieku dáva zrážku a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé. Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

Vážení zákazníci, Váš nový inhalátor je v vysoké kvalitei prístroj po inhalácii lieku dáva zrážku a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

- Pri používaní tohoto výrobku si pečlivo prečítajte návod.
- Určeno konfakt typy BF s dúšmi ďalších lístia.
- Udržujte v suchu

- 1. Dôležité bezpečnostné pokyny**
 - Tento prístroj je povolený použiť po účely popísané v návodoch na použitie. Vynímať výrobok z ruky spôsobením nesprávnym používaním.
 - Tento prístroj nie vhodný pre anestéziu a plnivé ventily.
 - Méi byť použitý použiť s originálnym príslušenstvom, ktoré je určené na použitie v tento návod.
 - Nepoužívajte prístroj a sifový adaptér, pokiaľ se nedovolia, že je pokazený alebo si všimnete čoho-koľvek nového.
 - Pri použití a sifový adaptér nikdy nezakrývajte.
 - Tento prístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno si ním skladovať opatrne. Dodržujte podmienky po skladovaní a prvotz popísané v oddiele „Technické špecifikácie“
 - Chraňte pred:
 - vodou a vlhkosťou
 - extrémnymi teplotami
 - nárazu a udutím na zem
 - znečistením a prachom
 - prípadným akustickým systémom
 - teplem a chladiem

Pro inhaláciu používajte puzdro léky, ktoré vám predovšetka lekári a pokiaľ je to dôležité, trvať a vymeniť predovšetka náuku neo potuobého dýchania.

- Zárka sa vzhľaduje pouz na kompresor. Vymeniteľné komponenty, ako napríklad rozprašovač, náústek, náústek, vzduchová hadica, filtry nepou, do záruky zahrnúť.
- Zárka propadá v prípade defektu alebo úprav prístroja. Táto záruka se nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, pokazením alebo nedodržovaním návodu k použití.

- 8. Technické špecifikácie**
 - Výkon aerosolu:** 0,45 ml/min. (0,9% NaCl)
 - Velikost častíc:** 75% < 5 µm 0,9% NaCl 3,11 µm (MMD 0,9% NaCl pomoci Cascade Capcator)
 - Výkon proudění vzduchu:** 12 l/min.
 - Hluchota:** 51 dBA
 - Nápljež zdroj:** 12V DC 2A
 - Sifový adaptér:** Vstup: 100-240VAC 50/60Hz 0,6A Vstup: 12V DC 2A
 - Kapacita inhalátoru:** min. 2 ml; maks. 16 ml
 - Reziální omezení:** 30 min. VYP / 30 min. ZAP
 - Provozní podmínky:** 10 - 40 °C / 50 - 104 °F maks. relativní vlhkosť 10 - 95 % 690 - 1060 hPa atmosférického tlaku

- 2. Příprava a použití tohoto přístroje**

Před použitím přístroje nejprve vyčistíte dle pokynů v části „Čištění a dezinfekce“.

1. Sestavte jednotlivé části inhalátoru (3). Zkontrolujte, aby jsou všechny díly kompletné.

2. Naplníte přístroj inhaláčným roztokem (3) podle pokynů lékaře a dbejte na to, aby ste nepokročili maximální hladinu.

3. Vzduchovou hadicu (2) pripojte k rozprašovaču (2) a inhalátoru (1) pomocí konektorů vzduchové hadice (4).

4. Pripojte sifový adaptér (3) k prístroju do konektoru pro sifový adaptér (2) a sifový adaptér pripojte k elektrické sieti (5).

5. Prepínač ON/OFF prepínače (2) do polohy «1» a prístroj zapnete. Po zapnutí prístroja si užite do úst náústek (6) nebo si nasadíte pedu z obliečkových hadíc.

 - Pomocí náústku alebo vlny dostane lekáre do plic
 - Vyberte si masku pouz dospělých (3) alebo masku pro děti (1) a uistite se, že máte pevně nasazenou oběh kolem úst a oběh nosu.
 - Použítie všechny komponenty, takže nosový nastavok (5), podo toho, ako určí lekár.
 - Počas terapie sa nachýdlyte a vydychujte pokone. Sledte v udovenej polohy a hornú časť tela mať vo vzpriamenej se a bábem léžby zadržte si v klidu.
 - Pohodlne se posadíte a horní část těla máte ve vzpriamenej polohy. Píhmi ani nikdy neležte na zádech. Neleďte dole, inhalátor přerušete.
 - Po skončení inhalace přerušete prepínač ON/OFF (2) do polohy «0». Prístroj vypne. Odpojte sifový adaptér (3) od elektrické sítě a od prístroja.
 - Odpojte vzduchovou hadicu (2) od rozprašovaču (2) a od konektoru vzduchové hadice (4) na prístroji.
 - Odstaňte z rozprašovaču zbytky léku dle pokynů v části „Čištění a dezinfekce“.

- Prístroj je určený pro používání v 30-minutových intervalech.** Vyměňte zapnutí po 30 min. používání a po dalších 30 min. ho můžete opět uvést do provozu.

- 3. Možnosti léby rozprašovačem „nEB PRO“**

Prístroj je vybavený inovatívnym rozprašovačem „nEB PRO“ (7), ktorý obsahuje ventový systém na zjednotenie synchronizovaného s dýcháním (1). Všetky bežné léky na inhaláciu môžu byť vstiahované inhaláciou.

- Pokročila léba**

Tato možnost léby poskytuje pacientovi maximální dodatek celkového množství léku do respiračního systému. Ventový systém optimálně přispívá k léku v průběhu inhalace (1). A redukci léku při výdechu (1a-B).

Ventový systém se synchronizuje s dýcháním a tím se optimalizují terapeutické účinky léku.

 - Namontujte membránu na držák ventu a náústek s vzduchovým ventilem (8).
 - Postupujte podľa pokynů jak si naplníte v kapitole 2.
 - Jen náústek s ventilem (8) umožňuje synchronizaci funkcí inhalátoru.

Kritka léba

Terapeutická léba se sniží, pokud není namontován držák na ventu.

Prenosný kompresorový inhalátor

- Plstový kompresor
- Vzduchová hadica
- Prepínač pre vzduchový filter
- Konektor vzduchových hadice
- Plnepnáč ON/OFF
- Konektor pro sifový adaptér
- Rozprašovač „nEB PRO“
 - Rozprašovací hadica
 - Membrána
 - Náústek s ventilom
 - Nosový nastavok
 - Maska na nos po dospělých
 - 1) Tvárová maska pro děti
 - Sifový adaptér
 - 1) Zostavenie jednotlivých častí rozprašovača
 - 1) Zostavenie zarízení
 - Naplnění aparátu
 - 1) Inhalace synchronizovaná s dýcháním
 - 1) Otevření prostoru pro vzduchový filtr
 - 1) Výměna vzduchové filtra
 - 1) Vzduchový filtr

Vážení zákazníci, Váš nový inhalátor Microfille je vysokokvalitné zariadenie na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé. Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

- 5. Údržba, péče a servis**

Všetké náhradní díly objednávajte výhradně u svého prodejce, lékárnika nebo kontaktního Microfille servisu (viz předslova).

- Rozprašovač, náústek a obliečkové masky doporučujeme vymeniť po 3 mesiacich používání.
- Filter udržujte v čistote a vymeňte ho, je-li špinavý. Vymeňte ho vždy po 3 mesiacich používání.
- Náhradní filtry jsou dodány spolu s prístrojem.
- Pro výměnu vzduchové filtra (3) odberte z prístroje pomocí šroubováku (3) kryt prostoru pro vzduchový filtr (3). Vymeňte použitý vzduchový filtr za nový. Opatrně odstráňte vzduchový filtr z prístroja.
- Ujistite sa, že je pevně ušitý do prístroja.

- 6. Poruchy a možné příčiny**

- Přístroj nejde zapnout**
 - Ujistěte se, že sifový adaptér (3) je správně zapojený do konektoru pro sifový adaptér (2) na prístroji a pripojený do elektrické siete.
 - Ujistite sa, že je vypínač ON/OFF (2) «1» v poloze «1».
 - Nepoužívajte prístroj a sifový adaptér, pokiaľ se nedovolia, že je pokazený, alebo ak spozorujete niečo nezvyčajné.
 - Ujistite sa, že vzduchová hadica (2) je na obou koncoch správne pripojená.
 - Ujistite sa, že vzduchová hadica není pomáčkana, zohýbaná, spinavá nebo upuťaná. Pokiaľ ste to nutné, zmeňte ju za novú.
 - Ujistite sa, že rozprašovač (2) je plně nasazený a hlaviice inhalátoru (2) je ušitá správně.
 - Zkontrolujte, zda byly připojeny všechny léky.

- 7. Záruka**

Na tento prístroj se vztahuje záruka 3 let od datu nákupu. Záruka je platná pouze po předložení záznamu listu vypl- plnění (viz zadní strana) a potvrzování data nákupu neo potuobého dýchania.
 - Zárka sa vzhľaduje pouz na kompresor. Vymeniteľné komponenty, ako napríklad rozprašovač, náústek, náústek, vzduchová hadica, filtry nepou, do záruky zahrnúť.
 - Zárka propadá v prípade defektu alebo úprav prístroja. Táto záruka se nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, pokazením alebo nedodržovaním návodu k použití.

- 8. Technické špecifikace**
 - Výkon aerosolu:** 0,45 ml/min. (0,9% NaCl)
 - Velikost častíc:** 75% < 5 µm 0,9% NaCl 3,11 µm (MMD 0,9% NaCl pomoci Cascade Capcator)
 - Výkon proudění vzduchu:** 12 l/min.
 - Hluchota:** 51 dBA
 - Nápljež zdroj:** 12V DC 2A
 - Sifový adaptér:** Vstup: 100-240VAC 50/60Hz 0,6A Vstup: 12V DC 2A
 - Kapacita inhalátoru:** min. 2 ml; maks. 16 ml
 - Reziální omezení:** 30 min. VYP / 30 min. ZAP
 - Provozní podmínky:** 10 - 40 °C / 50 - 104 °F maks. relativní vlhkosť 10 - 95 % 690 - 1060 hPa atmosférického tlaku

- 2. Příprava a použití tohoto přístroje**

Před použitím přístroje nejprve vyčistíte dle pokynů v části „Čištění a dezinfekce“.

1. Sestavte jednotlivé části inhalátoru (3). Zkontrolujte, aby jsou všechny díly kompletné.

2. Naplníte přístroj inhaláčným roztokem (3) podle pokynů lékaře a dbejte na to, aby ste nepokročili maximální hladinu.

3. Vzduchovou hadicu (2) pripojte k rozprašovaču (2) a inhalátoru (1) pomocí konektorů vzduchové hadice (4).

4. Pripojte sifový adaptér (3) k prístroju do konektoru pro sifový adaptér (2) a sifový adaptér pripojte do elektrické sieti (5).

5. Prepínač ON/OFF prepínače (2) do polohy «1» a prístroj zapnete. Po zapnutí prístroja si užite do úst náústek (6) nebo si nasadíte pedu z obliečkových hadíc.

 - Pomocí náústku alebo vlny dostane lekáre do plic
 - Vyberte si masku pouz dospělých (3) alebo masku pro děti (1) a uistite se, že máte pevně nasazenou oběh kolem úst a oběh nosu.
 - Použítie všechny komponenty, takže nosový nastavok (5), podo toho, ako určí lekár.
 - Počas terapie sa nachýdlyte a vydychujte pokone. Sledte v udovenej polohy a hornú časť tela mať vo vzpriamenej se a bábem léžby zadržte si v klidu.
 - Pohodlne se posadíte a horní část těla máte ve vzpriamenej polohy. Píhmi ani nikdy neležte na zádech. Neleďte dole, inhalátor přerušete.
 - Po skončení inhalace přerušete prepínač ON/OFF (2) do polohy «0». Prístroj vypne. Odpojte sifový adaptér (3) od elektrické sítě a od prístroja.
 - Odpojte vzduchovou hadicu (2) od rozprašovaču (2) a od konektoru vzduchové hadice (4) na prístroji.
 - Odstaňte z rozprašovaču zbytky léku dle pokynů v části „Čištění a dezinfekce“.

- Prístroj je určený pro používání v 30-minutových intervalech.** Vyměňte zapnutí po 30 min. používání a po dalších 30 min. ho můžete opět uvést do provozu.

- 3. Možnosti léby rozprašovačem „nEB PRO“**

Prístroj je vybavený inovatívnym rozprašovačem „nEB PRO“ (7), ktorý obsahuje ventový systém na zjednotenie synchronizovaného s dýcháním (1). Všetky bežné léky na inhaláciu môžu byť vstiahované inhaláciou.

- Pokročila léba**

Tato možnost léby poskytuje pacientovi maximální dodatek celkového množství léku do respiračního systému. Ventový systém optimálně přispívá k léku v průběhu inhalace (1). A redukci léku při výdechu (1a-B).

Ventový systém se synchronizuje s dýcháním a tím se optimalizují terapeutické účinky léku.

 - Namontujte membránu na držák ventu a náústek s vzduchovým ventilem (8).
 - Postupujte podľa pokynů jak si naplníte v kapitole 2.
 - Jen náústek s ventilem (8) umožňuje synchronizaci funkcí inhalátoru.

Kritka léba

Terapeutická léba se sniží, pokud není namontován držák na ventu.

Prenosljiv kompresorski inhalator

- Plstový kompresor
- Zračna cev
- Prepizničnik za vzdušni filter
- Vhod za zračno cev
- Silikal za nos in izloplj (ON/OFF)
- Vilnična ceva za adapter za izmenični tok
- Razpršilna komora „nEB PRO“
 - Glava razpršilnica
 - Membrana
 - Inštni nastavek s ventilom
 - Nosovni nastavek
 - Inhalacijska maska za odrasle
 - 1) Inhalacijska maska za otroke
 - 2) Adapter za izmenični tok
 - 3) Komplet za sestavo razpršilne komore
 - 4) Sklepanje naprave
 - 5) Polnjenje razpršilne komore
 - 6) Inhalacija, ki se sprejz s dihanjem usklajuje
 - 7) Otvoritev prostora za zračni filter
 - 8) Zamenjava zračnega filtra
 - 9) Vzdušni filter

Splošno varnostno. Váš inhalátor je v vysokokvalitnej napravi za inhaláčnou terapiju astmie, hroničnej bronhitisis a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

Váš nový inhalátor Microfille je vysokokvalitné zariadenie na inhaláciu terapie astmie, chronickej bronhitisis a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé. Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

- 5. Údržba, starostlivosť a servis**

Zadajte všetky náhradné diely u predaju alebo v servisnom stredisku. Na získanie údajov o miestnom dodávateľovi môžete kontaktovať priamo Microfille (pozri predovšetka alebo na www.microfille.com).

- Rozprašovač, náústek a masky na Váš porúčame vymeniť po 3 mesiacoch používania.
- Filter udržujte v čistote a vymeňte ho, ak je špinavý. Vymeňte ho vždy po 3 mesiacoch používania.
- Náhradné filtry sú dodávané spolu s prístrojom.
- Pre výmenu vzdušného filtra (3) odoberte z prístroja pomocou šroubováku (3) kryt priestoru pro vzduchový filtr (3). Vymeňte použitý vzduchový filtr za nový. Opatrne odstráňte vzduchový filtr z prístroja.
- Ujistite sa, že je pevně ušitý do prístroja.

- 6. Poruchy a možné příčiny**

- Přístroj se neda zapnout**
 - Ujistěte se, že sifový adaptér (3) je správně zapojený do konektoru pro sifový adaptér (2) na prístroji a pripojený do elektrické siete.
 - Ujistite sa, že je vypínač «1» «1» v poloze «1».
 - Nepoužívajte prístroj a sifový adaptér, pokiaľ se nedovolia, že je pokazený, alebo ak spozorujete niečo nezvyčajné.
 - Ujistite sa, že vzduchová hadica (2) je na obou koncoch správne pripojená.
 - Ujistite sa, že vzduchová hadica není pomáčkana, zohýbaná, spinavá nebo upuťaná. Pokiaľ ste to nutné, zmeňte ju za novú.
 - Ujistite sa, že rozprašovač (2) je plně nasazený a hlaviice inhalátoru (2) je ušitá správně.
 - Zkontrolujte, zda byly připojeny všechny léky.

- 7. Záruka**

Na tento prístroj se vztahuje záruka 3 roky, která plníne od datumu jeho nákupu. Záruka platí po předložení záznamu listu vyplnění (viz zadní strana) a potvrzování data nákupu neo potuobého dýchania.
 - Zárka sa vzhľaduje pouz na kompresor. Vymeniteľné komponenty, ako napríklad rozprašovač, náústek, náústek, vzduchová hadica, filtry nepou, do záruky zahrnúť.
 - Zárka propadá v prípade defektu alebo úprav prístroja. Táto záruka se nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, pokazením alebo nedodržovaním návodu k použití.

- 8. Technické údaje**
 - Výkon aerosolu:** 0,45 ml/min. (NaCl 0,9%)
 - Velikost častíc:** 75% < 5 µm NaCl 0,9% 3,11 µm (MMD 0,9% NaCl za pomoci Cascade Impactor)
 - Hluchota kompresoru:** 12 l/min.
 - Hluchota:** 51 dBA
 - Zdroj napájení:** 12V DC 2A
 - Živý adaptér:** Vstup: 100-240VAC 50/60Hz 0,6A Vstup: 12V DC 2A
 - Kapacita inhalátoru:** min. 2 ml; maks. 16 ml
 - Reziální omezení:** 0,7 min. ZAP / 30 min. VYP.
 - Předvozní podmínky:** 10 - 40 °C / 50 - 104 °F maks. relativní vlhkosť 10 - 95 % 690 - 1060 hPa atmosférického tlaku

- 2. Příprava a použití tohoto přístroje**

Před použitím přístroje nejprve vyčistíte dle pokynů v části „Čištění a dezinfekce“.

1. Sestavte komponenty (3) podle obrázka a zkontrolujte, aby jsou všechny díly kompletné.

2. Naplníte přístroj inhaláčným roztokem (3) podle pokynů lékaře a dbejte na to, aby ste nepokročili maximální hladinu.

3. Vzduchovou hadicu (2) pripojte k rozprašovaču (2) a inhalátoru (1) pomocí konektorů vzduchové hadice (4).

4. Pripojte sifový adaptér (3) k prístroju do konektoru pro sifový adaptér (2) a sifový adaptér pripojte do elektrické sieti (5).

5. Prepínač ON/OFF prepínače (2) do polohy «1» a prístroj zapnete. Po zapnutí prístroja si užite do úst náústek (6) nebo si nasadíte pedu z obliečkových hadíc.

 - Pomocí náústku alebo vlny dostane lekáre do plic
 - Vyberte si masku pouz dospělých (3) alebo masku pro děti (1) a uistite se, že máte pevně nasazenou oběh kolem úst a oběh nosu.
 - Použítie všechny komponenty, takže nosový nastavok (5), podo toho, ako určí lekár.
 - Počas terapie sa nachýdlyte a vydychujte pokone. Sledte v udovenej polohy a hornú časť tela mať vo vzpriamenej se a bábem léžby zadržte si v klidu.
 - Pohodlne se posadíte a horní část těla máte ve vzpriamenej polohy. Píhmi ani nikdy neležte na zádech. Neleďte dole, inhalátor přerušete.
 - Po skončení inhalace přerušete prepínač ON/OFF (2) do polohy «0». Prístroj vypne. Odpojte sifový adaptér (3) od elektrické sítě a od prístroja.
 - Odpojte vzduchovou hadicu (2) od rozprašovaču (2) a od konektoru vzduchové hadice (4) na prístroji.
 - Odstaňte z rozprašovaču zbytky léku dle pokynů v části „Čištění a dezinfekce“.

- Prístroj je určený pro používání v 30-minutových intervalech.** Vyměňte zapnutí po 30 min. používání a po dalších 30 min. ho můžete opět uvést do provozu.

- 3. Možnosti léby rozprašovačem „nEB PRO“**

Prístroj je vybavený inovatívnym rozprašovačem „nEB PRO“ (7), ktorý obsahuje ventový systém na zjednotenie synchronizovaného s dýcháním (1). Všetky bežné léky na inhaláciu môžu být vstiahované inhaláciou.

- Pokročila léba**

Tato možnost léby poskytuje pacientovi maximální dodatek celkového množství léku do respiračního systému. Ventový systém optimálně přispívá k léku v průběhu inhalace (1). A redukci léku při výdechu (1a-B).

Ventový systém se synchronizuje s dýcháním a tím se optimalizují terapeutické účinky léku.

 - Namontujte membránu na držák ventu a náústek s vzduchovým ventilem (8).
 - Postupujte podľa pokynů jak si naplníte v kapitole 2.
 - Jen náústek s ventilem (8) umožňuje synchronizaci funkcí inhalátoru.

Kritka léba

Terapeutická léba se sniží, pokud není namontován držák na ventu.

Prenosni kompresorski inhalator

- Plstový kompresor
- Cevje za vazduh
- Prepizničnik za vzdušni filter
- Konektor za cevjo za vazduh
- Prekidač Uključiljsključ (ON/OFF)
- Učlitična za strujni adapter
- Razpršilnač „nEB PRO“
 - Glava razpršilnica
 - Membrana
 - Nastavak za usta s ventilom
 - Nastavak za nos
 - Maskaz za odrasle
 - 1) Maskaz za decu
 - 2) Strujni adapter
 - 3) Sklepanje razpršilnica
 - 4) Sklepanje uređaja
 - 5) Punjenje razpršilnica
 - 6) Inhalacija, ki se sprejz s dihanjem usklajuje
 - 7) Otvorjenje prostora za filter
 - 8) Zamenjava filtra za vazduh
 - 9) Vazdušni filter

Polstovni koristo. Váš inhalátor je v vysokokvalitnej napravi za inhaláčnou terapiju astmie, hroničnej bronhitisis a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

Váš nový inhalátor Microfille je vysokokvalitné zariadenie na inhaláciu terapie astmie, chronickej bronhitisis a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé. Prostredie prostím typy plynový pedálny tá, aby ste pokračovali v lekárskej terapii a informáciu (vďaka se bezpečnosti) na inhaláciu terapie astmy, chronickej bronchitídy a ostálych respiračných ochorení. Rozprašovač má niekoľko funkcií, ktoré umožnia ľahšie používanie. Pre inhaláciu terapie môžu byť použité všetky bežné léky v telo potuobé.

- 5. Vzděržanie a servis**

Zadajte všetky náhradné diely pri vašem trgovci al v lekarni, lahko pa se obrnete tudi na servisno službu (glej pregledov).

- Priporočamo, da razlino komoro, usni nastavek in masko zamenjate po 3 mesecih uporabe.
- Filter morate redno pregledovati, da je čist, ter ga v razlino, če je umazana, zamenjati al pa ga morate zamenjati po 3 mesecih uporabe.
- Nemljete uporabljati sterilizacijski ciklus dok si komponente neč uvjek tople.

- Pri uporabi pazljivo prečitate uputstvo.
- Tip BF

- Čuvati na suvom

- 1. Bizičnostno upozvstava**

- «Vazna uređaja se može koristiti isključivo u svrhe opisane u ovom uputstvu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala neskladnom uporabom uređaja.
- Uvjeti uređaja nije pogodan za primenu u anesteziji i plućnoj ventilaciji.
- Ovaj uređaj može biti korišten isključivo uz originalno uputstvo i na način kako je objašnjeno u ovom uputstvu. Nemljete koristiti ovaj uređaj i strujni adapter ukoliko smatrate da je oštećen ili primetno nešto neodređeno.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj i strujni adapter ukoliko uređaj ne ispravi ili nakon maksimalno 3 meseca korištenja.
- Ovaj uređaj sadrži osjetljive komponente i sa njim se mora oprezno rukovati. Pogledajte čuvanje i uslove rada opisane u delu « Tehničke špecifikacije».

- Zaštita ga od:
 - vode i vlage
 - ekstremnih temperatura
 - udara u padu
 - prijavljene i praline
 - direktne sunčeve svetlosti
 - toplote ili hladnoće
- Napomena:
 - Uvjeti uređaja koji su vam je preporučio vaš trgovac i pridržavajte se uputstava lekara kada je reč o doziranju, duci i učestalosti terapije.
- Koristite isključivo ovaj uređaj i strujni adapter ukoliko smatrate da je oštećen ili primetno nešto neodređeno.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj i strujni adapter ukoliko smatrate da je oštećen ili primetno nešto neodređeno.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj i strujni adapter ukoliko uređaj ne ispravi ili nakon maksimalno 3 meseca korištenja.
- Ovaj uređaj sadrži osjetljive komponente i sa njim se mora oprezno rukovati. Pogledajte čuvanje i us